

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a JSL-W301 mesh porlasztót (a továbbiakban: a készülék), kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően és biztonságosan tudja használni. Kérjük, a kézikönyvet jól tárolja, miután elolvasta, későbbi elolvashoz és hivatkozásokhoz.

[Minőségbiztosítás]

A fő egységre 12 hónap ingyenes garancia. Orvosi palack (hálós tálcával együtt) 3 hónap ingyenes garancia. A jótállási időszak alatt a sérüléstől függően döntünk a karbantartásról vagy a sérült alkatrészek cseréjéről.

A tartozékok fogyóeszközök, nem tartoznak a garanciális körbe. Ha módosítania kell, válassza ki azokat a termékeket, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek a széfhez. A cég maszk gyártója és az európai információk a címkén szerepelnek.

Az alábbiak nem tartoznak bele a garanciális körbe:

- Emberi hiba, érintés, beázás, nedvesség által okozott károk
- A nem megfelelő kezelési utasítások által okozott károk.

- Véletlenül megsérült
- Cégünk felhatalmazása nélkül a felhasználók, akik a szét- és összeszerelést végzik önmagukért.
- A termék sorozatszám elszakadt vagy nem jól felismerhető, és nincs garancialevél és számla.

MEGJEGYZÉS: Vegye ki a "Felhasználói oldal" jótállási jegyet, és lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy cégünkkel, ha a porlasztója javításra szorul. Eközben kérjük, tartsa jól a csomagolódobozt, hogy felhasználhassa, amikor elküldi cégünknek.

1. fejezet A termék bemutatása

1. Termék áttekintése

A készülék légúti betegségek kezelésére és légúti fertőzések megelőzésére szolgál. Az eszköz bizonyos áramkörü frekvencia rezgések nyomják, hogy a piezoelektromos kerámia rezgésharmóniája legyen, ami a mentális háló nagy sebességű rezgését okozta. A gyógyszerfolyadék pedig gyorsan átjut a mentális hálólemez mikrohálos lyukon, hogy számtalan mikroporlasztó részecske legyen. Az inhalációs kezelés céljára maszkokkal vagy szájrészekkel a betegek légzőrendszerébe történő importálással.

2. Alkatrészek Fő

egység, Orvosi palack (hálós tálcával együtt). Kiegészítők (Aeroszolos maszk porlasztóval felöltött aeroszolos maszk porlasztóval csecsemő- és szájdaráb). Lehet 3 komponensből, vagy 2 vagy 1 darabból) Részletek lásd az 1. képet:



1. Fő egység



2. Orvosi palack



3. Szájdaráb




4. Aeroszolos maszk porlasztóval



5. Aeroszol maszk porlasztóval csecsemő számára

1. kép Alkatrészek

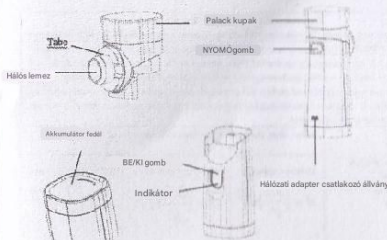

2. kép Részletes alkatrészek

3. Elérhető tartomány

A porlasztót légúti betegségek kezelésére és légúti betegségek megelőzésére fertőzéses tervezték. Széles körben használják a légúti betegségek, például a hideg, láz, hörghurut, asztma, tüdőgyulladás, tüdőgyulladás és tüdő szívbetegség. Foglalkozási betegségek gyógyítására is használható; torokpolást adni a művészeknek, fül-orr-gégészet gyógyítási torokbetegségek, mint például a krónikus allergiás rhinitis, akut gégegyulladás, heves pharyngitis, akut mandibulárisitis.

A porlasztót arcmaszkkal kell használni, és az arcmaszk csatlakozócsővének átmérője 20,0±0,1 mm, ezért az arcmaszk csatlakoztatható a porlasztóhoz szorosan.

4. Alkalmazható személyi

hatókör A porlasztó felnőttek, idősek, csecsemők és gyermekek számára elérhető felügyelet. A

porlasztó otthoni környezetben használható, és megfelel a követelményeknek IEC 60601-1-11.

Ellenjavallatok:

- 1) A készülék nem alkalmazható anesztéziás légzőrendszerre és légzőrendszerre.
- 2) csecsemőket és gyermekeket felöltött felügyelete alatt kell tartani.
- 3) A pentamidin nem alkalmazható az eszközre.

5. Működési elv


Az eszközt bizonyos áramkörü frekvencia rezgések nyomják, hogy a piezoelektromos kerámia rezgési harmóniája legyen, ami a mentális háló nagy sebességű rezgését okozta. A gyógyszerfolyadék pedig gyorsan átjut a mentális hálólemez mikrohálos lyukon, hogy számtalan mikroporlasztó részecske legyen. Az inhalációs kezelés céljára maszkokkal vagy szájrészekkel a betegekhez történő behozattal légzőrendszer.

6. Fő teljesítményindex

Lásd az 1. táblázatot, a készüléket 0,9%-os fiziológiás sóoldattal tesztelték 25±3°C hőmérsékleten, páratartalom 60% 5%R.H.

1. táblázat Fő teljesítmény

Porlasztó ultrahang munkafrekvencia 120KHz±10%	
A porlasztó permetezési sebessége	20,2 ml/perc
Medica üveg gyógyszer folyadék hőmérséklet	41 °C
Működési zaj	30 db(A)
A kódrészecskék átmérője	5 µm

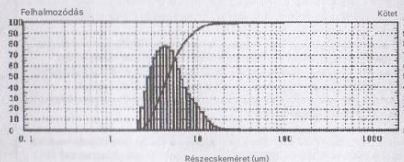

3. kép Kód részecske ekvivalens térfogata

MEGJEGYZÉS: A vízszintes vonal a részecske átmérője, az adatok a logaritmus eloszlás. A bal függőleges vonal a térfogat kumulatív százaléka, amely megfelel a görbe felfelé irányuló trendjének. A jobb oldali függőleges vonal a térfogatszázalék tartománya, amely megfelel a grafikon histogramjának vagy görbéjének.

A maximális és minimális ajánlott töltési térfogat 0,5–8 cm³.

2. fejezet Működés

- A keresztfertőzés elkerülése érdekében a porlasztót csak egy személy használja
- Kérjük, tisztítsa meg és fertőtlenítse a porlasztót, amikor először használja, vagy mielőtt és használat után szűrís a meg Lásd a 3. fejezetet.

1. Csatlakoztassa a tápegységet

Ez a rebufézer egyaránt használható AA alkáli elemekkel vagy lítium akkumulátor névleges feszültséggel 3,7 V ± 20% (opcionális tartozékok), mobiltelefon Android 8.0 lapos tülve

(kiegészítő vásárlás)

1. Helyezze be az elemeket (4. kép)

(1) Nyissa ki az elemtartó fedelét;

(2) Helyezze be az elemeket (2 db alkáli AA elem);

(3) Csukja be az elemtartó fedelét.



4. kép Elemek behelyezése

MEGJEGYZÉS:

- (1) Kérjük, helyezze be az elemeket az elemrekesz polaritásának szimbólumaként. (2) Kérjük, ne keverje össze a különböző stílusokat, gyártókat, gyárakat.
- (3) Ha nem használ porlasztót, vegye ki az elemeket.

2. Adapter használata

(1) Csatlakoztassa az adapter kimenetét a váltóáramú adapterhez (2. kép);

(2) Csatlakoztassa az adapter kimenetét a tápellátóhoz.

MEGJEGYZÉS:

1) A felhasználóknak emellett mobilhőhöz kell vásárolniuk, kérjük, vegye figyelembe, hogy a kimeneti port a mobilhőhöz meg kell egyeznie a szükséges váltakozó árammal.


2) A biztonságos használat érdekében olyan mobilhőhöz használjon, amely megfelel az elektromos biztonsági szabványoknak GB 9706.1-2007 vagy IEC 60601-1.

- 3) A mobilizált műszaki paramétereinek meg kell felelniük az alábbiaknak
 4) Bemeneti feszültség: AC 100-240V, 50/60 Hz;
 5) Kimeneti feszültség: 3-5VDC, 1-2A 3.
 lítium akkumulátor (opcionális tartozék)

- (1) Ha a megvásárolt porlasztó lítium akkumulátor funkcióval rendelkezik, a gép közvetlenül használható lítium akkumulátorral. lítium akkumulátor névleges feszültsége 3,7 V
 (2) Ha a lítium akkumulátor tápfeszültsége kisebb, mint 3,3 ± 0,1 V, a piros jelzőfény elkezd világítani, és automatikusan kikapcsol, ha a feszültség kisebb, mint 3,0 ± 0,1 V. Ekkor töltsd fel a lítiumot akkumulátor, használja a hálózati adaptert a gazdagép és a hálózati aljzat összekapcsolásához, a piros fény villog töltés közben, a lítium akkumulátor meglett, és a piros lámpa kialszik.
 (3) töltés közben csatlakoztassa a tápadapter kimeneti portját a 2. képen hátulnézetben látható AC hálózati adapter aljzatához.

2. Porlasztó egység

- (1) Kérjük, használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsa a porlasztót, majd zártsa meg, lásd a 3. fejezetet részletesen.
 (2) Egyik kezével tartsa a főegységet, a másikkal a gyógyszeres üveget, nyomja meg, kövesse a nyílást, amíg "kattintás" hangot nem hall. (5. kép)

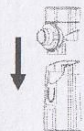

5. kép Porlasztó egység


MEGJEGYZÉS:

- (1) Ha nem a megfelelő helyre szereli össze az orvosi fecskendő, az elektródát okozhat nem tud elfordulni, és a porlasztó nem működik.
 (2) Tartsa tisztán a főegységet és az orvosi palackot (lásd a 3. fejezetet), különben a porlasztó nem működik.
 3. Adjon hozzá folyékony gyógyszert (6. kép)
 (1) Egyik kezével a gépegységet tartja, a másik kezével a gyógyszeres pohár fedelet forgatja

6

(2) Tegyén folyékony gyógyszert az orvosi palackba:

(1) Figyeljen arra, hogy a gyógyszer ne kerüljön a szemébe, a szája felé, és ne kerüljön a szájába.

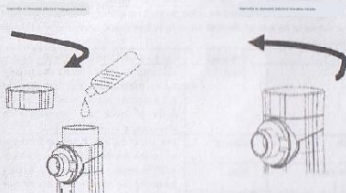

1. Nyissa ki a fedelet Adjon hozzá gyógyszerfolyadékot.
 2. Csukja be a fedelet


6. kép Folyékony gyógyszer hozzáadása

MEGJEGYZÉS:

- (1) Javaslat. Max. gyógyszerfolyadék 8 ml min 0,5 ml (2) A gyógyszerfolyadék behelyezése után a porlasztó berendezésének vagy megfordulásának elkerülése érdekében gyógyszerfolyadék szivárgását okozhatja.
 (3) Tartsa a gyógyszerfolyadékot és a hálót teljesen érintkezésben, hogy elkerülje a hálólemez légütését.

4. A porlasztó használata A

- Nebulizer tartozékal közé tartozik a szájrész, a felhőt maszk és a gyermekmaszk. Ha kell a torok általi kezeléshez használja a fűvökát; eközben az orrúreg/vagy torok kezelésre van szükség, válasszon maszkot. (1)
 Csatlakoztassa a fűvökát vagy a maszkot és a főegység küldő csövét a 7. kép szerint, vagy csatlakoztassa a főegység maszkját és küldőcsövét a 8. kép szerint.

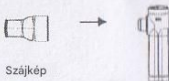

Szájkép

7

7. kép Szájrész összeállítás



Aeroszolos maszk porlasztóval (felhőteknek) Akroszolos maszk porlasztóval (csecsemőknek)

8. kép Maszk összeszerelés

2. Nyomja meg a START/STOP gombot, a bekapcsolásjelző lámpa (kék fény) kigyullad és felvilágosul.
 3. Maradjon nyugodt, lazítson és üljön jól, miközben a kezével tartsa a porlasztót simán, vedd mélyen, és lassan lélegezzen a hatékonyabb kezelés érdekében.

(A) szájrész használatakor helyezze a szájrész lapos végét a szájba, az ajkakat enyhén zárva, hogy a gyógyszer folyékony legyen az érintett területre. (2)

Ha maszkot használ, helyezze a maszkot kissé közel az archoz, így jobban eltakarja az orrot üreg és száj

1. Kezelés az orrúreggel, mely belégzés az orrúregből, kilégzés a szájból. Kezelése
 2. torok keresztül, szájon keresztül történő belégzés, orrúregből kilégzés.
 3. A kezelés alatt használható és 2.

(1) Tegyén 0,3%-os fiziológiás sóoldatot az orvosi palackba, összeszerelés után és használat előtt nyomja meg a START/STOP gombot a teszteléshez, ha nem működik megfelelően (6. fejezet). (2) Kérjük, kövesse a 788. ábrát a tartozékok csatlakozásainál a szájrész összeszereléséhez vagy maszk.

- (3) Kérjük, használja a szájrészt megfelelően, ne permetezze a folyadékot a nyelvére. (4) Ne nyeljen le folyadékot, és ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön közvetlenül az érintett területre.
 (5) A helytelen gesztus és a nem egyenletes légzés a légutak eltérődését okozhatja. (6) 20 perces munkavégzés után az időjelző (sárga) folyamatosan villogni kezd, és automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ha a palack nincs megtöltve folyékony gyógyszerrel, a porlasztó nem fog működni.

(7) Enyhén döntse meg a főegységet maga felé, hogy a vibrációs hálót a vízbe merítse. Gyógyszer.

MEGJEGYZÉS: Ha a vibrátort nem meríti a gyógyszerbe, a készülék 10 másodpercen belül nem porlasztódik.

(8) Ha a gyógyszer nem sok, döntse a készüléket maga felé a START/STOP oldalra), tegye a gyógyszert a hálós lemezbe összegyűjtve, hogy teljes mértékben kihasználja a maradékot. Gyógyszer.

(9) A készüléknek kerülnie kell az üres ütést, ha a hálólemez eltörik

8

- (10) Ha az alacsony feszültség jelzőfénye (piros fény) továbbra is lassan villog, a tápellátás bekapcsolni kérjük, a lehető leghamarabb cserélje ki az új alkáli elemeket.

(11) Használat közben ne hullamozson olyan vagy vibráljon a készülék, ellenkező esetben a készülék automatikusan lekapcsol.

(12) A tiszta víz alkalmas normál működési módra, különben a készülék nem fog működni.

5. Kapcsolja ki az áramellátást

1. Nyomja meg a START/STOP gombot az áramellátás kikapcsolásához, a tápellátás jelzőfénye (kék fény) kialszik.
 2. Amikor a mobilizált használja, a készülék használata után húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

6. Használat után

1. Távolítsa el a szájrészt vagy a maszkot
 2. Tartsa az egyik kezével a főegységet, és nyomja meg a [PUSH] gombot a 9. képen látható főegység mögött. Fogja meg a gyógyszeres palackot a másik kezével, vegye ki a gyógyszeres üveget a talp mentén...

ki az led-ért, öntse ki az összes maradék folyékony gyógyszeres üveget, és azonnal tisztítsa meg a hagyja az alkatrészeket levegőn megszáradni, és tárolja a készüléket tiszta környezetben. Lásd 3. és 4. fejezet.



9

3. fejezet Tisztítás és fertőtlenítés

- Minden használat után először dobjon ki minden maradék gyógyszert, és távolítsa el a tartozékok a főegységtől a tisztításhoz és fertőtlenítéshez. Szárítsa meg az alkatrészeket azonnal mosás után.
- Feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.
- Ne tárolja, ha a főegység, a gyógyszeres üveg és a tartozékok megmaradtak nedvesség.

1. Gyógyszeres üveg

1. Nyissa ki a gyógyszeres üveget, és dobja ki a maradék gyógyszert;
 2. Öntsön egy kis mennyiségű forró vizet a gyógyszeres üvegbe, és zárja le a fedelet. MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy a víz hőmérséklete 30-60°C legyen

3. Nyomja meg a START/STOP gombot 5 másodpercig, a tápfeszültség jelző (kék fény) és az alacsony vízszint jelzője (sárga fény) és az alacsony feszültség jelzője (piros fény) folyamatosan világít. Tisztítsa meg a készüléket a desztillált víz porlasztásához 1-2 percig, hogy eltávolítsa a visszamaradt gyógyszert a hálónyílásokból. 4. Öblítse le az desztillált vízzel a gyógyszeres üveget és az orvosi kupakot. Finoman törölje le a felesleget puha, tiszta ronggyal öblítse meg, vagy hagyja az alkatrészeket tiszta környezetben levegőn megszáradni.
 5. Merítse a gyógyszeres flakont 75%-os orvosi alkoholos fertőtlenítéssel legalább 3 percig, majd vegye ki a gyógyszeres üveget tiszta környezetbe, majd megszáradjon és tárolja. MEGJEGYZÉS:

- 1) A tisztításhoz és fertőtlenítéshez használjon orvosi gézt és orvosi pamut törölt
 2) Ne törölje át selyempapírral vagy más kendővel, különben a háló nem porlasztódik megfelelően.
 3) Ne törölje át éles tárgyval, és ne érintse meg a hálót.
 4) Minden nap az utolsó kezelés után fertőtlenítsa a hálót a következő oldatban: 2ml Ecet (1 rész fehér ecet és 3 rész desztillált víz), VAGY 2 ml forró víz (legfeljebb 80 C). Kapcsolja be a készüléket a fertőtlenítő oldat porlasztásához, amíg el nem fogy. Kapcsolja ki a készüléket, majd áztassa a gyógyszeres üveget ecetben vagy forró vízben 3 percig, majd vegye ki és öblítse le tiszta vízzel.
 5) A fenti megoldáson kívül ne használjon más háztartási fehérítőt a készülék tisztításához.

2. A főegység tisztítása

1. Finoman törölje le a főegységet 75%-os orvosi alkohollal, és törölje le a felesleges vizet puha, tiszta ruhával;

10

2. Tisztítsa meg a főegységet és a gyógyszeres palackot összekötő elektródákat, hogy a készülék megfelelően működjön.

Vigyázat:

1) Ne törölje le a főegységet más illékony folyadékkal, például benzollal vagy higítóval.

2) Ne öblítse le és ne merítse a főegységet semmilyen folyadékba.

3. A szájrész és a maszkok tisztítása és fertőtlenítése

1. Távolítsa el a szájrészt vagy a maszkokat;

2. Öblítse ki a szájrészt és a maszkot tiszta vízzel 2-3 percig (a víz hőmérséklete ≤50 °C);

3. Száraz nedvesség orvosi gézzel.

4. Törölje le a maszkot és a szájrészt 75%-os orvosi alkohollal legalább 3 percig a fertőtlenítéshez, majd tárolja levegőn megszáradni.

▲ MEGJEGYZÉS:

1) Tisztítsa meg és fertőtlenítse az összes alkatrészt.

2) A maszkok eldobhatóak. A szájrész újra használható. A biztonságos használat érdekében kérjük, vásárolja meg az alkatrészeket a szokásos gyártótól.

4. fejezet Tárolás és karbantartás

1. Tárolási feltételek:

- (1) Hőmérséklet: -20 °C – 55 °C;
- (2) Relatív páratartalom: < 80% R.H.
- (3) Légnyomás: 70,0–106,0 kPa;
- (4) Egyéb követelmények: Nincs közvetlen napfény, Szellőztetés, Nem korrozív gáz, Nincs fűtős készülék, vagy Nyitott tűz.

2. Tárolási utasítások:

- (1) A termék javasolt érvényességi ideje 3 év.
- (2) Minden használat után tisztítsa meg és fertőtlenítse a készüléket. Szerelje össze az eszközt. Tárolja a készüléket a tárolótokba vagy tiszta környezetben.
Érvényesség: A készüléket 3 év és 4000 alkalommal javasolt használni; Akkumulátorra a készülék napi 30 perces üzemelés esetén kb. 8 napig használható, ezt követően egy másik akkumulátornak vagy akkumulátor felteve. A lítium akkumulátor megközelítőleg töltsenek 60 percnél tovább kell működni képes és megfelel a követelménynek EN62133:2013.

2. A készülék karbantartása

1. Munkakörülmények

- (1) Környezeti hőmérséklet: 10 °C – 40 °C;
- (2) Relatív páratartalom: ≤ 80% R.H., Nincs páralecsapódás
- (3) Légnyomás: 85,0–106,0 kPa;
- (4) Tápellátás: DC 3V±10% (2 db alkáli AA elem) VAGY lítium elem névleges feszültség 3,7V±20%, mobiltöltő (további vásárlás, műszaki paraméterek követelményei lásd a 2. fejezetet)

2. Karbantartási utasítások

- (1) Működtesse a készüléket normál üzemi állapotban, ne működtesse a készüléket fűtőberendezés vagy nyitott tűz közelében. Ne szárítsa meg a készüléket és tartozékait a mikrohullámú sütővel, sütőben szárítással, hajszárítóval stb.
- (2) Ne érintkezzen a porlasztóval és tartozékaival korrozív folyadékokkal vagy gázokkal.
- (4) Ne szerelje a főegységet a tápvezetékek köré. (5) Tekintse meg a 6. fejezetet a megoldásért, vagy forduljon a vállalatához vagy a vásárlási kereskedőhöz, amikor a készülék nem tud működni.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Tűs a készülék szétszerelését, javítását vagy cseréjét.

5. fejezet Biztonsági információk és gondozás

1. Biztonsági információk

- 1 Ne használja és ne tárolja a készüléket nedves helyen, például fürdőszobában. Használja a készüléket az üzemi hőmérsékleten és páratartalomon belül.
 - 2 Olvasson el minden információt a használati útmutatóban és az egyéb szakirodalomban a dobozban található a készülék használatát elől.
 - 3, A használati útmutatóban említett tartozékok csak a készülékhez valók.
 - 4 Ne tegye ki a készüléket vagy annak bármely alkatrészét erős ütéseknek, például leejtésnek a padlón. 5. Ne rázza meg a készüléket használat közben.
 6. Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a készüléket vagy az alkatrészeket.
 7. Távolítsa el az összes elemet, ha a készülék nem működik.
 8. Amikor a mobiltöltőt használja, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és tisztítsa meg a készüléket.
 9. Ne működtesse a készüléket, és ne érintse meg a mobiltöltő aljátát vagy a tápkapcsolót nedves kézzel.
 10. Ne merítse a főegységet vízbe vagy más folyadékba, ne fröccsenjen víz vagy más folyadék a tápegységre vagy a hálózati adapterre. Kapcsolja ki a tápellátást, és azonnal törölje szárazra egy tiszta ruhával.
 11. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne vigye magával, és ne hagyja töltve a gyógyszeres üveget Gyógyszer vagy desztillált víz.
 12. Ne működtesse a készüléket újratölthető elemekkel, dobja ki a készüléket, alkatrészeket és opcionális tartozékokat a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően. A jogellenes ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat.
 13. Ez az eszköz kizárólag emberi használatra engedélyezett.
2. Gondoskodjon a készülékről
1. A porlasztó vényköteles orvosi eszköz A gyógyszer típusához vagy dózisához kövesse a kezelőorvosa és/vagy engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember utasításait
 2. Ne használja a gyógyszert észterrel, zsírral vagy lebegő részecskével, beleértve a gyógynövényeket is, javasolja a standard porlasztó gyógyszer használatát az orvos tanácsának megfelelően. 3. A készülék minden alkalommal 10-20 percig porlasztást végez, a Gyógyszer mennyisége 2-4 ml. de továbbra is az orvos által javasolt módon használható. 4. Az eszköz egy személyes orvosi berendezés, ne keverje másokkal a használatát.
 5. Ne érintse meg a hálót a kezével vagy más tárggyal. 6. Tartsa távol a készüléket felülegyelet nélküli csecsemőktől és gyermekektől.
 7. Javasoljuk, hogy az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében az eszközt legalább 3,3 méter távolságra tartsa távol a 2 W feletti fogyasztású elektromos termékektől; Konzultáljon kezelőorvosa szívritmus-szabályozót viselő felhasználók számára.
- FIGYELEM: A pentamidin nem alkalmazható a készülékre!** A készülék nem alkalmazható anesztéziás légzőrendszerre és légzőrendszerre!

6. fejezet Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás A		
JSL-W301 Mesh Nebulizer az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra készült. A JSL-W301 Mesh Nebulizer vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy a olyan környezet.		
Kibocsátási teszt	1. megfeleléségi csoport	Elektromágneses környezeti irányítás
RF sugárzás CISPR11		A JSL-W301 modell csak belső funkciójához használ rádiófrekvenciás energiát. Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátás nagyon alacsony, és valószínűleg nem okoz interferenciát közeli elektronikus berendezések. A
RF kibocsátás CISPR11	B osztály	JSL-W301 modell alkalmas az alábbi használatra minden létesítmény, beleértve a háztartási létesítményeket és azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a háztartási célú épületeket ellátó kisfeszültségű közcélú áramellátó hálózathoz.
Harmonikus kibocsátás IEC61000-3-2	N/A	
—	N/A	
kibocsátások IEC61000-3-3		

Terméktartozékok listája



Permetező x1



Felnőtt maszk x1



Gyermek maszk x1



harapás x1



USB tápkábel x1



Utasítások x1